


光固化复合树脂

可乐丽菲露™ AP-X

特别适合后牙

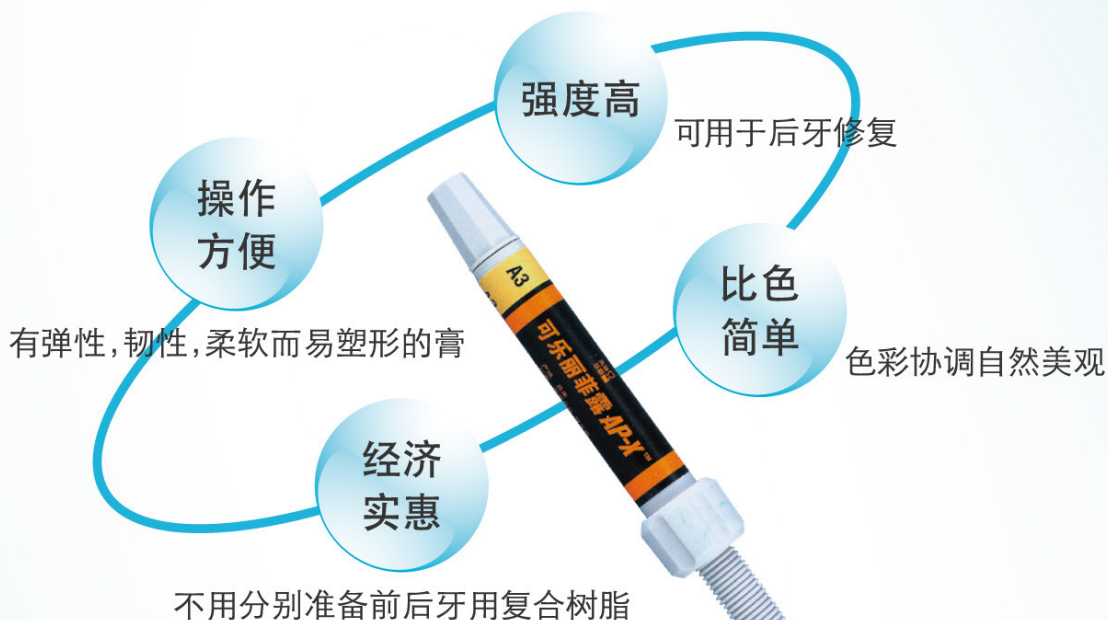

无机填料

高密度 充填

与自然牙颜色相似, 比色简单, 具有很好的美学效果。
能配合可乐丽菲露™ SE BOND 进行简单快速的树脂修复。

■ 比色构成

VITA牙颜色标准		A2 A3 A3.5 A4	B2 B3 B4 D2 D3 D4	C2 C3 C4	A1 B1 C1
可乐丽菲露™ AP-X	标准色系	A2 A3 A3.5 OA3	B2 B3	C2 C3	XL
	牙颈部色系	A4	B4	C4	

注册证编号:

光固化复合树脂 可乐丽菲露™ AP-X 国械注进20173637096

牙科树脂粘合剂 可乐丽菲露™ SE BOND: 国械注进20163631311

光固化复合树脂 可乐丽菲露™ 玛吉斯特LV2: 国械注进20153632377

生产厂家: 可乐丽则武齿科株式会社 沪械广审(文)第2019094874号

■ 使用前请仔细阅读产品说明书

■ 禁忌内容或注意事项详见说明书



自酸蚀粘合剂 可乐丽菲露™ SE BOND

光固化复合树脂（前后牙通用） 可乐丽菲露™ AP-X

可乐丽菲露™ 玛吉斯特LV2



1 | 涂处理剂




2 | 放置20秒，用弱~中气流完全干燥




3 | 涂粘合剂



4 | 弱气流吹均匀

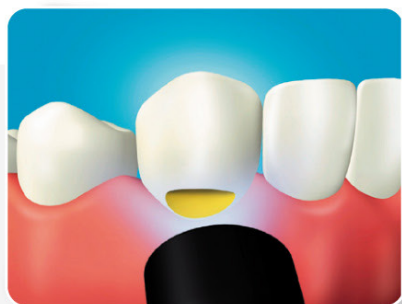

5 | 光照10秒

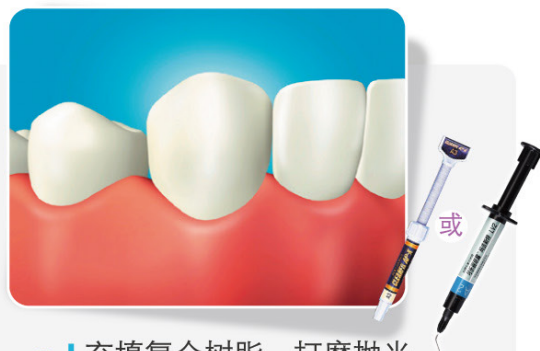

6 | 充填复合树脂，打磨抛光